

**PORTABLE 4 EN 1
MANUAL DE USO
CRYOLIPOLISIS
EQUIPO DE CAVITACIÓN**



CRIOLYPOLISIS

Contenido

Aviso de seguridad.....	1
Aviso de operación	1
Resumen.....	3
Ventajas	4
Ilustración de la máquina y funcionamiento	5
Pasos de la operación	5-12
Contraindicaciones.....	16-17
Parámetros técnicos y lista de accesorios.....	13
Servicio postventa y mantenimiento.....	14

1. Aviso de seguridad

1.1 No desmonte el equipo ni intente realizar alguna otra operación, que no hayan sido indicados en nuestras instrucciones. Todo el trabajo de reparación debe ser realizado por nuestro personal profesional.

1.2 No monte ni opere este equipo mientras esté cerca del agua o sus manos estén mojadas. Por favor, no deje caer líquido sobre él.

Desconecte el enchufe del tomacorriente cuando cumpla con las siguientes condiciones:

- A. El equipo tocó líquido.
- B. El equipo tiene olor anormal, humo o ruidos fuertes.
- C. El cable está roto.
- D. El equipo sufrió alguna caída y se rompió.

1.3 Por favor, no ponga nada en los cables, no coloque el equipo en ningún lugar donde alguien pueda pisar el cable.

1.4 Por su seguridad saque el cable de alimentación después de usarlo.

1.5 No ponga nada en el enchufe del equipo, de lo contrario puede provocar un incendio.

Si algo entra en el equipo, no lo saque por usted mismo, contacte a su distribuidor o a nuestra empresa inmediatamente.

1.6 Por favor, no coloque el equipo sobre cualquier cosa que no pueda mantenerse firme, Evitar que el equipo este girando o tambaleándose.

1.7 Nuestra compañía tiene el derecho de modificar la información en esta introducción antes de notificar.

2. Aviso de Operación

Antes de la operación, lea el siguiente contenido.

2.1 Es imprescindible realizar diferentes ajustes de acuerdo al tratamiento.

2.2 La aplicación de la máquina nunca debe ser dolorosa, tampoco debe causar enrojecimiento a la piel o dejar marcas.

2.3 No aplique el dispositivo a niños menores de 7 años. El tratamiento para

Los niños mayores de 7 años requieren consejo médico.

2.4 No utilice este dispositivo si tiene fiebre, inflamación, dermatitis. (acné, eccema, herpes), verrugas, problemas de coagulación, heridas abiertas o recientemente suturadas. Tampoco usar con enfermedades progresivas (cáncer, SIDA, hepatitis, enfermedades de la sangre, etc. o de la sangre).

2.5 No aplique el dispositivo si tiene o ha tenido flebitis, si ha tenido cirugía de venas en los últimos dos meses, si tiene venas varicosas u hormigueo en las extremidades. Si tiene alguna duda consulte a un médico.

2.6 Nunca use el dispositivo en una mujer embarazada.

2.7 Se puede usar en todas las áreas externas y sanas del cuerpo, excepto en los ojos, Garganta, orejas, glotis y zona genital.

2.8 No debe aplicarse dentro de la boca, o en la membrana mucosa, o en Pezones, o lunares sin consejo médico.

2.9 Nunca use el dispositivo si padece epilepsia. El dispositivo no debe ser utilizado por cualquier persona que padezca una enfermedad mental.

2.10 En el caso de un tratamiento a largo plazo con medicamentos como los antiinflamatorios, anticoagulantes, antibióticos o si su piel se hiere al menor shock. Consulte a su médico antes de usar.

2.11 Nunca aplique a las partes del cuerpo con joyas o anillos.

2.12 El uso regular de la máquina mejora el bienestar; los resultados serán mejores al utilizarse durante un período prolongado de tiempo. No seguir las instrucciones de funcionamiento y las recomendaciones de uso pueden traer menos resultados de lo esperado. No use el dispositivo más allá del tiempo recomendado.

2.13 Si sus síntomas no mejoran, o si tiene alguna duda sobre el uso consulte a su médico.

2.14 El efecto puede variar según su edad, hábitos de vida (nivel de actividad física, dieta, etc.).

2.15 La máquina se puede usar después de cualquier cirugía plástica solo mientras se siga la instrucción del cirujano.

2.16 La máquina está diseñada para uso profesional, cualquier uso personal de este dispositivo, está prohibido.

2.17 El tiempo de trabajo continuo de la Máquina no excederá de 2 horas.

Para un mejor mantenimiento de su máquina, se recomienda dejarla descansar durante 10-15 minutos después de que la maquina ha trabajado durante una hora.

3. Resumen

Hemos llegado a pensar en perder grasa a través del ejercicio y dieta, succionándola a través de la liposucción, o incluso disolviéndola con químicos o inyecciones. Ahora hay otra opción: la criolipólisis.

La criolipólisis apunta de manera selectiva a los depósitos de grasa localizados: grasa abdominal, tejidos adiposos y protuberancias por encima de las líneas de incisión de la cesárea. Su forma de trabajar es enfriándolos justo por encima de la congelación de una manera gradual para poder reducirlos sin causar ningún daño a los tejidos circundantes. Cryolipolysis ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para grasas, reducción celular así como para varias aplicaciones dermatológicas que requieran

enfriamiento. El procedimiento estaba previamente disponible en Europa, Asia y Canadá. El término criolipólisis combina “crio” (frío helado) con “Lipólisis” (la descomposición química de la grasa). La premisa es que bajo condiciones cuidadosamente controladas, las células grasas subcutáneas son más vulnerables que otros tejidos circundantes a los efectos del frío.

La criolipólisis se diferencia de otros procedimientos de eliminación de grasa en varias formas.

Por ejemplo, la liposucción succiona las células grasas del cuerpo, a menudo destruyéndolas.

Las inyecciones que derriten la grasa.

Zerona utiliza energía láser de bajo nivel para abrir un poro en la célula grasa, evacuando su contenido.

Procedimiento de criolipólisis: Qué esperar

El procedimiento de Cryolipolysis generalmente se realiza por un cirujano plástico o un dermatólogo en su consultorio, y dura entre una y tres horas.

La zona para ser tratada será marcada y cubierta con una almohadilla de gel para proteger la piel.

Luego, el médico utiliza un aplicador de vacío manual para extraer suavemente el exceso de piel y grasa subyacente entre dos paneles de enfriamiento, sentirás un tirón firme, y puedes sentir un leve frío en la zona tratada. Esta sensación tiende a disiparse, y el área se adormecerá (como si fuera una bolsa de hielo).

El proceso de enfriamiento dura un tiempo predeterminado. Debe dañar las células de grasa, convirtiendo la grasa dentro de las células de un líquido a un sólido. La zona grasa podría enrojecerse en los siguientes dos meses, y eso es normal.

No hay evidencia de que el procedimiento tenga efectos adversos en los niveles de enzimas hepáticas o grasas en la sangre (como el colesterol).

Experimentará una reducción gradual de la capa de grasa, generalmente por más de dos a cuatro meses.

No hay agujas, anestesia, incisiones quirúrgicas, medicamentos para el dolor y no hay tiempo de inactividad. Los efectos secundarios temporales incluyen enrojecimiento, moretones menores, calambres, hormigueo o entumecimiento en el área tratada.

El fabricante dice que la gente puede disfrutar de actividades relajadas como leer, escuchar música, navegar por Internet, incluso siestas, durante el procedimiento, y puede reanudar su funcionamiento normal.

Rutina el mismo día.

4. Ventajas:

4. 1. Principio de funcionamiento

Para que el triglicérido de la grasa pueda transferirse al sólido en la temperatura normal, envía una onda de hipotermia precisa a la parte disuelta por contraponer y elimina el adipocito. Cuando el adipocito se haya enfriado, se resolverá naturalmente, adelgazando el depósito de grasa, luego por la metástasis y lipólisis, quedará la grasa parcialmente disuelta.

4.2. Después del tratamiento con criolipólisis, ¿cuál es la reacción?

La cura no es invasiva, el paciente puede moverse de inmediato puede realizar actividades como el trabajo y ejercicio.

La parte tratada puede volverse roja y durar varios minutos u horas, esta parte incluso puede magullarse, pero después de semanas, desaparecerá.

4.3. Doloroso

¡La mayoría de los pacientes se sentirán cómodos!

Durante la prueba clínica, nadie ha necesitado analgésico, normalmente, pueden leer libremente, y pueden trabajar con la computadora, escuchar música y relajarse

4.4. ¿Cuánto tiempo durará el efecto curativo?

El efecto curativo puede durar al menos un año.

4.5. ¿Cuáles son las diferencias entre otros?

Liposucción

Ventaja: puede sacar mucha grasa una vez.

Necesitan una anestesia completa de tu cuerpo, dejará una cicatriz.

Calor o cavitación RF

Ventaja: puede afectar a la grasa profunda.

Dañará las células normales y te hará sentir dolor.

Criolipólisis

Ventaja: nunca dañará las células normales.

4.6. Conveniente y de buen aspecto.

Es un dispositivo portátil, puedes llevarlo a todas partes sin cargar cosas voluminosas.

4.7. Disponibilidad

Cabezal de enfriamiento por onda fría funcional.

Esta es una cabeza hecha por un material especial, puede alcanzar -5 grados y disminuir nuestra temperatura celular gradualmente, hasta romper el enlace celular.

4.8. Ventajas

- No hay tiempo de inactividad
- No se necesita anestesia.
- Sin dolor
- No hay incisiones


4.9. Alcance tratado



La pantalla del asa es la misma que la pantalla principal de la máquina.



Interruptor de control de vacío (interruptor de emergencia)

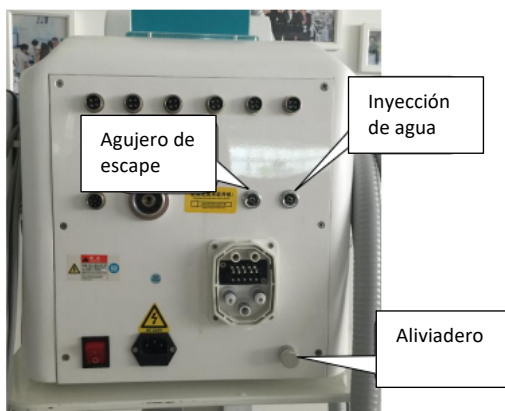

Aviso: Cuando reciba la máquina, debe agregar primero agua destilada o purificada, luego encienda la máquina. Cada semana debe agregar un poco de agua, cada mes debe cambiar el agua y vuelva a llenar de agua nueva.

Fuente de agua: agua pura o agua destilada.

5.2 Cavitación de ultrasonido 40KHZ

A través del ultrasonido fuerte, va directo a la capa grasa, vibra rápidamente y llega a celulitis profunda, produce cavitación al vacío, golpea poderosamente

Las células grasas, les permite producir grietas internas y se disuelven para ser las grasas libres.



5.3 sistema de RF de 6 polares

Es un electromagnético similar al microondas, el rango espectral no pertenece.

El rango de microondas cuando se trabaja en el cuerpo, el trabajo de RF en el tejido adiposo 10 mm-30 mm dentro de la piel, sentirá un poco de calor por dentro, pero la superficie será fresca, es un proceso comodo.

Y el sistema de radiofrecuencia emitió una alta frecuencia de ondas de radio

5. MHz (5 millones de veces), alcanza precisión directa en grasa profunda

Acelera el metabolismo, inhibe la síntesis de grasas, las grasas disueltas logran inmediatamente resultados


5.4 Sistema de lipólisis láser.

La lipólisis láser emite niveles bajos de energía láser, lo que crea una sustancia química en las células grasas, descomponiendo los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres y glicerol y liberándolos a través de canales en las membranas celulares.


Los ácidos grasos y el glicerol se transportan alrededor del cuerpo a los tejidos que los usarán durante el metabolismo para crear energía.



Operación de pantalla

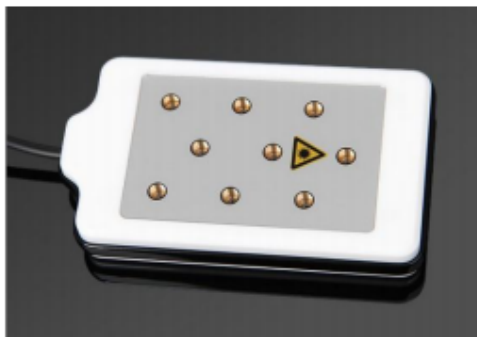

Después de encender la máquina, elija la manija que necesite.

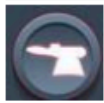

Cryolipolysis



40KHZ Ultrasound Cavitation





6-polar RF



Lipo-laser

A. sistema de cryolipólisis



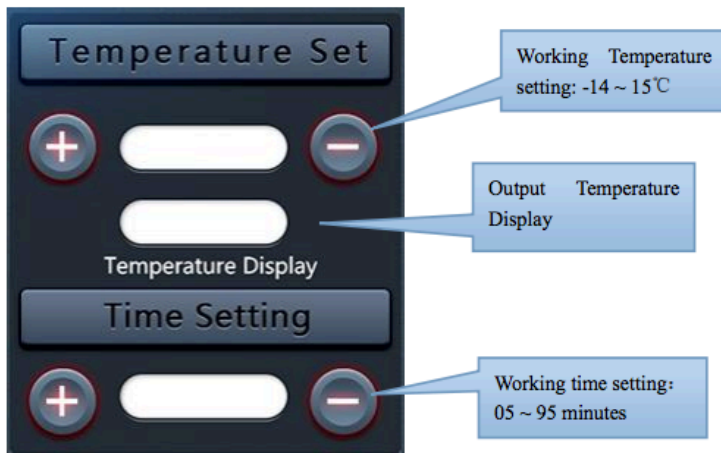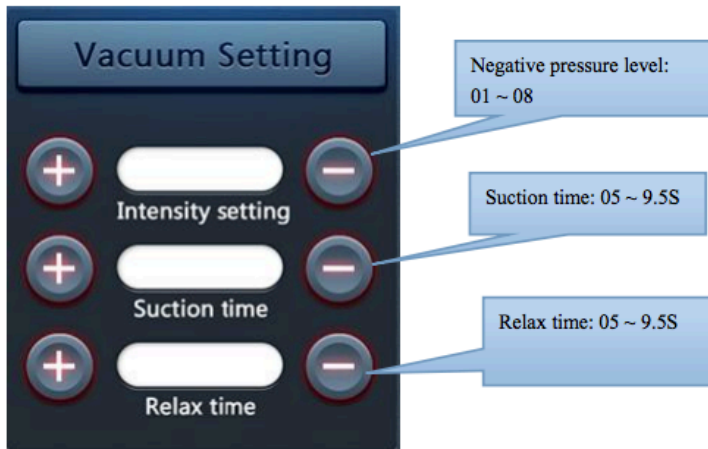

Nota: cuando se da tratamiento, el mejor ajuste de temperatura: 3 °C - 5 °C, el maneral no puede tratar por encima del cuello, ombligo y hueso. Durante el tratamiento, es importante prestar atención y preguntar al cliente sobre las sensaciones que percibe. Si el paciente se siente demasiado frío o incómodo, presione "Interruptor de emergencia" o "pausa" para detener la máquina.



Iniciar / pausa

NOTA: Por lo general, el tiempo de succión al vacío es menor que el tiempo de relajación.
Sugerencia de tiempo de tratamiento:
25-30 minutos / tiempos,
un mes / tiempo, 1-3 Meses es curso de tratamiento.



B. Sistema de cavitación 40K



Modo de cavitación seleccionar:

A: La onda cuadrada es para las partes de acumulación de grasa.

B: Pulse Wave que es para terapia de brazos, muslos y otras partes, y para obesidad leve.

C: La onda triangular es para cadera, abdomen y espalda y obesidad moderada

D: Onda continua es para grasa persistente o de tipo altamente obeso.

Configuración de la hora: 20-30min, según la necesidad de los clientes.

Ajuste de intensidad: 01-20, general desde el principio, luego aumente lentamente; establecer 15 -20 energía es lo mejor.

C. sistema de radiofrecuencia



Selección de modo RF:

A: La onda cuadrada es para las partes de acumulación de grasa.

B: Pulse Wave para terapia de brazos, muslos y otras partes, o tipo de obesidad leve.

C: La onda triangular es para cadera, abdomen, espalda, o moderada

D: Onda continua es para grasa persistente o de tipo altamente obeso.

Configuración de la hora: 20-30min, según la necesidad de los clientes.

Ajuste de intensidad: 01-30, general desde el principio de 5, luego aumente lentamente; ajustar la energía 15 -20 es la mejor opción.

D. Sistema de lipólisis láser.



Selección del modo láser:

- A. onda continua
- B. Onda de pulso lenta (brillar 10 segundos, detenerse durante 2 segundos)
- C. Onda del pulso medio (brillo 3 segundos, parar durante 1 segundo)
- D. Onda de pulso rápido (brillo 1 segundo, parada durante 0,5 segundos)

Configuración de la hora: 30-40mins, según la necesidad de los clientes.

Ajuste de intensidad: 01-06, general desde el principio de 1, luego aumente lentamente;

La configuración de energía 5 es la mejor.

6. Pasos de la operación

- 1) Verifique todos los accesorios para ver si están conectados correctamente, limpie o Desinfectar los accesorios.
- 2) Limpiar la piel.
- 3) Marque el área donde necesite tratar.
- 4) Colóque la máscara anticongelante en el área de tratamiento.
- 5) Coloque el mango de Cryolipolysis en el área de tratamiento.
- 6) Conecte la alimentación y encienda la alimentación general del panel de control.
- 7) De acuerdo con el estado de la parte gruesa del cliente, ajuste la intensidad y el vacío Modo y tiempo de trabajo.
- 8) Encienda el sistema Cryolipolysis. Empiece a trabajar en el cuerpo. Al mismo tiempo, puede ajustar la intensidad del sistema con el botón de la pieza de la manija.
- 9) Después del tratamiento, haga una pausa en el trabajo, luego apague la alimentación. Limpiar los repuestos y los colocamos en original.

7. Contraindicaciones

- 7.1 Embarazadas o mujeres durante la menstruación.
- 7.2 Epiléptico
- 7.3 Pacientes con neoplasia.
- 7.4 Paciente cuya herida después de la operación no se ha curado.
- 7.5 Inflamación aguda o pacientes epidémicos.
- 7.6 Personas con enfermedades del corazón o con marcapasos.
- 7.7 Personas que padecen enfermedades renales (cálculo biliar).
- 7.8 Personas con objetos metálicos dentro de su cuerpo.
- 7.9 Mujeres en la menstruación, el período de control de la natalidad, el período de incontinencia por emicción o con operación del vientre.
- 7.10 Personas cuyo cuerpo siempre lleva mucho calor interior.
- 7.11 Personas que tienen hipersensibilidad genética.

8. Parámetros técnicos y lista de accesorios

Parámetro técnico

Voltaje	AC110V / 220V 50-60Hz
Potencia	500W
Temperatura	-14 ° C ~ 15 ° C
Salida de presión	0-900Kpa
Pantalla táctil de	8 pulgadas.
Frecuencia de cavitación	40khz.
Salida láser	650nm 50MV
RF	5MHZ
Peso neto	30 kg
Medida	54x56x81cm

Lista de accesorios

No.	Descripción	Cantidad.
1	maquina principal (Con mango de criolipólisis)	1 PC
2	membresía anticongelante	10pcs
3	40K mango de cavitación	1pc
4	almohadillas láser	6pcs
5	manijas de RF	1pc
6	cable de alimentación	1pc
7	embudo de agua	1pc
8	fusibles	2 piezas
9	titular	1set
10	manuales	1 libro

9. Servicio postventa y mantenimiento

El plazo de mantenimiento de la garantía del dispositivo principal es de 1 año y para la pieza de repuesto 3 años.

Meses a partir de la fecha de compra según el recibo. (El gasto es no se incluye.)

Tenemos servicio de mantenimiento, se puede renovar garantía pero con cargos extra. Por favor contactar con el distribuidor si es necesario cambiar las piezas prescindibles.

Productos

A. Garantizamos la calidad de nuestros equipos, normalmente no hay problema de calidad

1. Si hay una inconformidad, envíenos un correo electrónico o llámenos para explicar los motivos. Lo mejor es tratar por correo electrónico o por teléfono. Pues algunos de los problemas son causados por el uso de la máquina de una manera incorrecta.

2. Le sugerimos al cliente que tome fotos del área donde ocurre el problema, Lo pasaremos a nuestro técnico, nuestro técnico le dará una respuesta satisfactoria. responderemos dentro de 1-7 días hábiles

3. Si el problema proviene de la pieza de repuesto dentro de la garantía, podríamos considere cambiar la pieza, que podría ser enviada con su siguiente orden. Si el próximo pedido es incierto, podríamos pagar el costo del flete.

Para enviar los repuestos.

4. Si el problema proviene del dispositivo principal dentro de la garantía, podríamos aconsejamos a nuestro cliente que devuelva el dispositivo a nuestra empresa para que lo reparen o podríamos reenviar uno nuevo a nuestro cliente.

Si el costo de repara el dispositivo problemático de nuevo en BEST es más que el valor de un nuevo dispositivo, BEST lo tomaría en consideración, de acuerdo con el Estado.

B. No proporcionaremos garantía de mantenimiento si los problemas son los siguientes:

- a) Desmontaje de la máquina por sí mismo;
- b) Caídas del equipo;
- c) Falta de custodia y protección razonables;
- d) No operar de acuerdo con el manual del usuario.
- e) razones de gastos

Si hay cambios en el diseño y especificación de la máquina, no lo notificaremos.

Adicionalmente.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la empresa de marketing local.

Todo en uno, haremos todo lo posible para servirle y también necesitaremos su total cooperación.

Gracias.